




WiFi無線高清檢測儀
WiFi Skin/Scalp Analyzer

使用說明書
User Manual

200倍WI-FI頭皮檢測儀 200 times WI-FI Scalp Analyzer

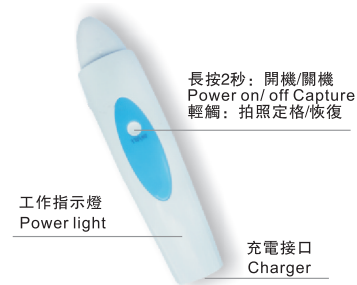

白色：真菌殘留/頭皮屑
Red spot: Fungi live, folliculitis




藍色熒光：化學殘留
Blue fluorescence:
Chemical residues



紅色：真菌活體/毛囊炎
White spot : Fungal residues and dandruff

透明：白發
Transparency : White hair

三光譜光源 Skin Analyzer Lens Details

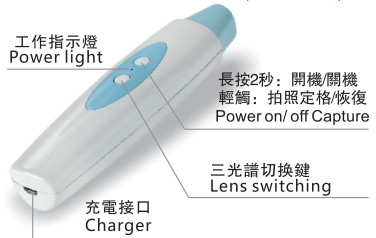


50倍WI-FI三光譜皮膚檢測儀 50 times WI-FI Skin Analyzer



UV 光
UV Light



表皮層
Epidermis of Skin

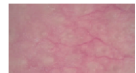

真皮層
Dermis of Skin

三光譜皮膚效果示例
Three layer of skin

操作系統安裝 Using and Install

1. 安卓系統 Android system

使用安卓系統的手機、平板的二維碼掃描軟件(微信掃一掃不適用)直接掃描此二維碼後，點擊

 下載安裝或通過谷歌商店搜索“CF685A”下載安裝軟件。

Using your phone or tablet's QR-Code scanner scan the code and then download it directly.

Search “CF685A” in Google Play , press" install "and then it will come a logo on the desktop like this.

2. 蘋果系統(ISO)系統 ISO system

A. 直接使用蘋果應用商店，點擊蘋果APP，在APP應用商店搜索“mlgcamera”後出現 點擊下載安裝即可。

B. 使用蘋果IOS系統的手機、平板的二維碼掃描軟件（微信掃一掃不適用）直接掃描此二維碼後，點擊下載安裝即可。

A. Search “mlgcamera” in APP STORE , press “ install ” and then it will come a logo on the desktop like this.

B. Or scan the QR-CODE and then install it , it suit for all IOS system.



3. 手機及平板連接操作 (安卓及ISO蘋果系統適用) Phone and Tablet using (Android and IOS system)

1. 打開檢測儀的電源開關，等3-5秒後WiFi綠色指示燈開始閃爍，表明檢測儀WiFi信號已經啟動可以使用。
2. 打開手機及平板的WiFi信號，搜索mlg-p1xxxx(每臺儀器身上都備有一個專屬ID號，比如mlg-p0002)，在手機WiFi欄搜索到本機的ID號點擊連接，(密碼：88888888)，幾秒後儀器顯示已連接。
3. 點擊手機及平板桌面上的 圖標，打開畫面，雙擊進入即可進行操作使用。
- 1.Press the power button,the green light is lit up ,3-5 seconds later the lens LED lights light up
- 2.Click “Setting” of Iphone or Ipad, and conect the WI-FI “mlg_p1xxxxxx” ,the password is “88888888” ,connect it.
- 3.Back to the desktop, click APP “mlgcamera” and then enter system

安全警告及注意事項

1. 勿自行拆解本產品，以避免靜電擊穿精密芯片。
2. 勿用酒精等有機溶劑清潔產品。
3. 勿用手指觸摸鏡頭，以免表面造成刮痕和臟污。
4. 戶外使用時應避免高温和高濕環境中，防電子器件短路。

本產品不具有防水功能，請應避免淋雨和進水。

5. 若不慎使异物或水分/液體進入產品內部，立即斷開電源并送至維修中心檢修，切勿自行處理。
6. 在長時間不使用產品時，請記住關閉產品電源。
7. 使用產品前，請務必詳細閱讀本產品使用說明書。
8. 請勿長時間充電，電充滿後請拔下充電器，長時間充電會損壞電池使用壽命。
9. 長時間使用，機器後端發熱屬CPU正常散熱不影響機器使用。
10. 不可充電時使用機器以免觸電。

Safety warning and Notice

1. Do not remove the cover of the control module or power supply adapter to protect the chips.
2. Do not clean the product with alcohol or organic solvent.
3. Do not touch the lens with your fingers to avoid scratching and dirt on the surface.
4. Outdoor use ,please avoid short circuit of electronic devices when in high temperature and high humidity.
5. Do not handle it by yourself ,if water or liquid enters into the product by accident , disconnect the power immediately and send it to the maintenance center for repair.
6. Keep the device closed if do not use for a long time.
7. Read the manual and notice before using.
8. Do not charge for a long time. Remove the charger after full charge. Charging for a long time will damage the battery life.
9. After a long time of use, the heating of the back of the machine belongs to the normal heat dissipation of CPU, it does not affect the use of the machine.
10. Do not use device when charging.

分析對比操作說明 | 蘋果系統 IOS System Analyzer and Compare Instruction

注意：敬請先連接儀器WIFI信號後方可進入操作
Note: Connect with device WIFI ID before using

A. 注册和配置步驟 Register and Setting



1. 點擊桌面圖標

1. Click



2. 點擊 **登錄**，進入控制界面，注册基本信息
Press "**Config**" into the system, register customer information, and then click "enter"



3. 注册和配置完成后，50倍鏡頭勾選 "Skin"，200倍鏡頭勾選 "Scalp"

After registering, 50 times lens choose "Skin", 200 times lens choose "Scalp"




4. 點擊 **登錄**，進入軟件界面
Click "Enter" **enter** to the software

B. 登錄步驟 Login In



1. 點擊 **登錄** 進入操作系統
Click "**Enter**", enter into analyzer system

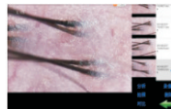


2. 進入操作界面進行圖像拍照操作
Press "Freeze" on the handpiece or "Capture", take the clear image

C. 圖像對比操作 Image Compare



1. 勾選所需圖像點擊對比按鍵
Choose image

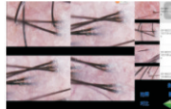


2. 自行勾選2-4個圖案進行對比
2-4pcs clear image compare

D. 圖像分析操作 Image Analysis


(注：頭皮、皮膚及毛發分析的結果類同。)
(Note : Skin compare please follow the upper)




1. 點擊皮膚模式登錄進入
操作界面進行拍照
Click "skin" and then
enter into the system
taking image

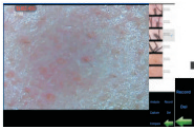


2. 勾選所需圖像點擊分析按鍵
Choose the clear
images

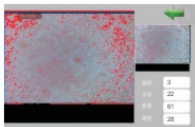


3. 獲取分析總覽結果
Press "Analysis"
and see result

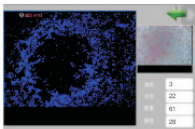


4. 進行分類分析說明
Skin test result

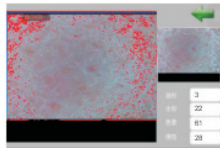


油份分析表示
營養成份結果
**Oil Test
and Result**

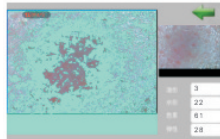

水份分析表示
所含水分結果
**Water Test
and Result**

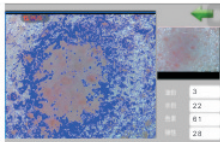

彈性分析表示
彈力素質結果
**Pigment Test
and Result**

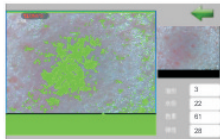

色素分析表示
顏色成份結果
**Flexible Test
and Result**


分析對比操作說明 | 安卓系統Android System Analysis and Compare Instruction

注意：敬請先連接儀器WIFI信號後方可進入操作

Note: Connect with device WIFI ID before using

A. 注册步驟 Register

注册客户相关资料以便标识，方便查找及发送给客户
Register customer info, it will help to search customer information.

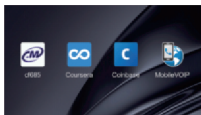


1. 點擊桌面圖標

Click



2. 進入控制界面
點擊注册

Enter into system

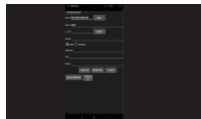


3. 注册完成后點擊登錄
Press "Register"
and insert customer
information



4. 直接進入操作系統
Press "Login in"
into system

B. 配置設置 Setting

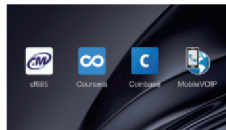


1. 點擊桌面圖標

Click



2. 進入控制界面，
點擊配置

Enter into system

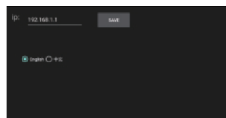


3. 按圖標內容設置
完成後
Press "Config" to
set just like
Language etc

Note: please do not change the IP, it's always 191.168.1.1



4. 返回進入登錄
操作界面
Save the info and
back to system

C. 登錄步驟 Login In

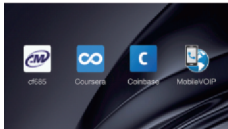


1. 點擊桌面圖標


Click



2. 進入控制界面
點擊登錄
Enter into system

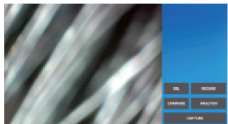

3. 進入操作界面
Take image

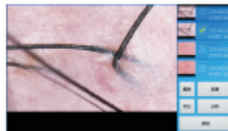


4. 進行圖像拍照操作
Take clear hair
image



D. 圖像對比操作 Image Compare



1. 點擊頭皮模式登錄進入操作界面進行拍照
Click "scalp" and enter into system taking hair image

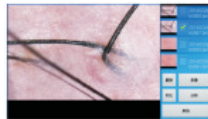

2. 勾選所需圖像點擊對比按鍵
Choose the clear images

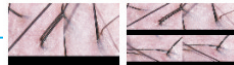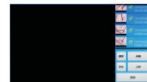

自行勾選2-4個圖案進行對比
2-4pcs images compare




Reference picture

(注：頭皮、皮膚及毛發分析的結果類同。)
(Note : Skin compare please follow the upper)




0.0	0.0
0.6	0.1


<https://www.alandental.com>

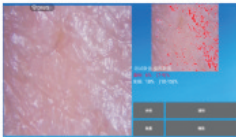


油份分析表示
營養成份結果
Oil Test
and Result

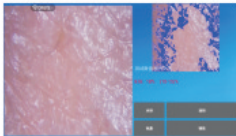

水份分析表示
所含水份結果
Water Test
and Result

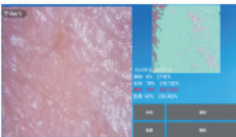

彈性分析表示
彈力素質結果
Flexible Test
and Result

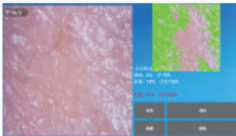

色素分析表示
顏色成份結果
Pigment Test
and Result